


# МЕДИН-САФИС

## стол рентгенохирургический

101.800

- незаменим при проведении широкого спектра диагностических и лечебных рентгенохирургических процедур с использованием рентгенаппарата с С-дугой, а также в составе ангиографического комплекса
- столешница выполнена из карбонового волокна, что обеспечивает высокую прочность, низкую абсорбцию рентгеновского излучения и уменьшает лучевую нагрузку
- регулировки высоты, бокового и продольного наклонов, а также продольный, поперечный и диагональные сдвиги осуществляются с пульта с помощью электроприводов

- управление осуществляется с помощью двух проводных пультов, джойстика (а также ножных педалей - опция)
- система управления позволяет интегрировать стол в ангиографический комплекс
- для комфорта пациента стол оснащается антипролежневым матрасом с антистатическим покрытием
- продолжительная автономная работа благодаря увеличенной емкости аккумуляторных батарей

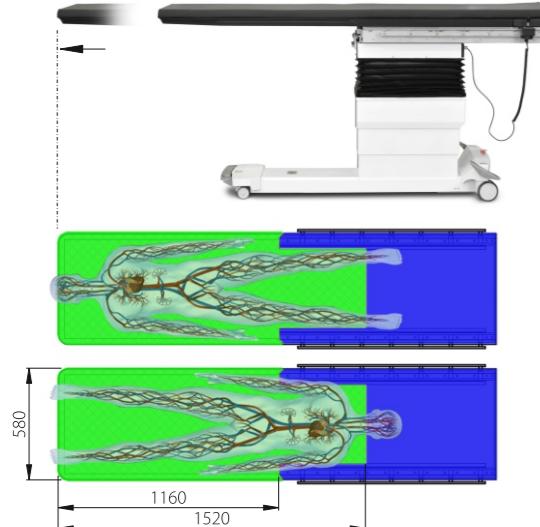

Рентгенопрозрачная зона (обозначена зеленым цветом)



Вариант использования С-дуги рентгенаппарата




Столик инструментальный  
(опция)



Удлинитель боковой планки стола  
(опция)



Траверса поперечная для монтажа  
приспособлений  
(опция)

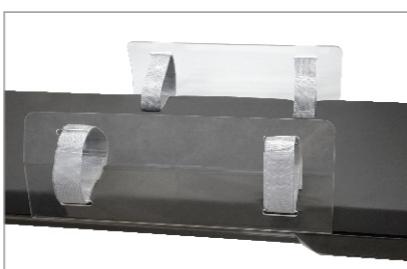

Ограждение для рук  
(опция)

Безопасная рабочая нагрузка ... 220 кг  
Масса стола ..... 350 кг

